



InHealion

Elite 200 - Οδηγός Χρήσης

Περιεχόμενα

1. Συσσκευή
2. Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση συσκευής
3. Επιλογή και εκτέλεση προγραμμάτων
4. Σύνδεση στην ιστοσελίδα
5. Κατέβασμα εφαρμογής στον υπολογιστή/Laptop
6. Εγκατάσταση εφαρμογής στον υπολογιστή/ Laptop
7. Σύνδεση συσκευής με υπολογιστή/Laptop μέσω USB
8. Εισαγωγή προγραμμάτων/συχνοτήτων στην συσκευή μέσω υπολογιστή
9. Εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό Android
10. Σύνδεση στην εφαρμογή του κινητού Android
11. Σύζευξη συσκευής και smartphone μέσω bluetooth
12. Εισαγωγή προγραμμάτων/συχνοτήτων στην συσκευή μέσω κινητού


Καλώς Ήλθατε

Ευχαριστούμε!

Η συσκευή Elite 200 είναι το αποτέλεσμα 10ετούς βελτίωσης και εμπειρίας στην κατασκευή συσκευών βιοσυντονισμού. Για την κατασκευή του έχουν χρησιμοποιηθεί κορυφαίας ποιότητας υλικά και σε συνδυασμό με το άψογο λογισμικό, είναι ικανό να σας προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Δημιουργήσαμε την Elite 200, εστιάζοντας στην ευκολία χρήσης και με στόχο την βελτίωση της υγείας σας.

Οι στόχοι και οι προσδοκίες της εταιρείας μας δεν ήταν ποτέ υψηλότεροι και ανυπομονούμε να βιώσετε την εμπειρία του Elite 200.

Περιεχόμενο συσκευασίας

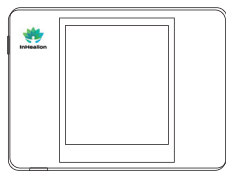

Φορτιστής




Καλώδιο Dash
Type-C




Οδηγός χρήσης

Συσκευή

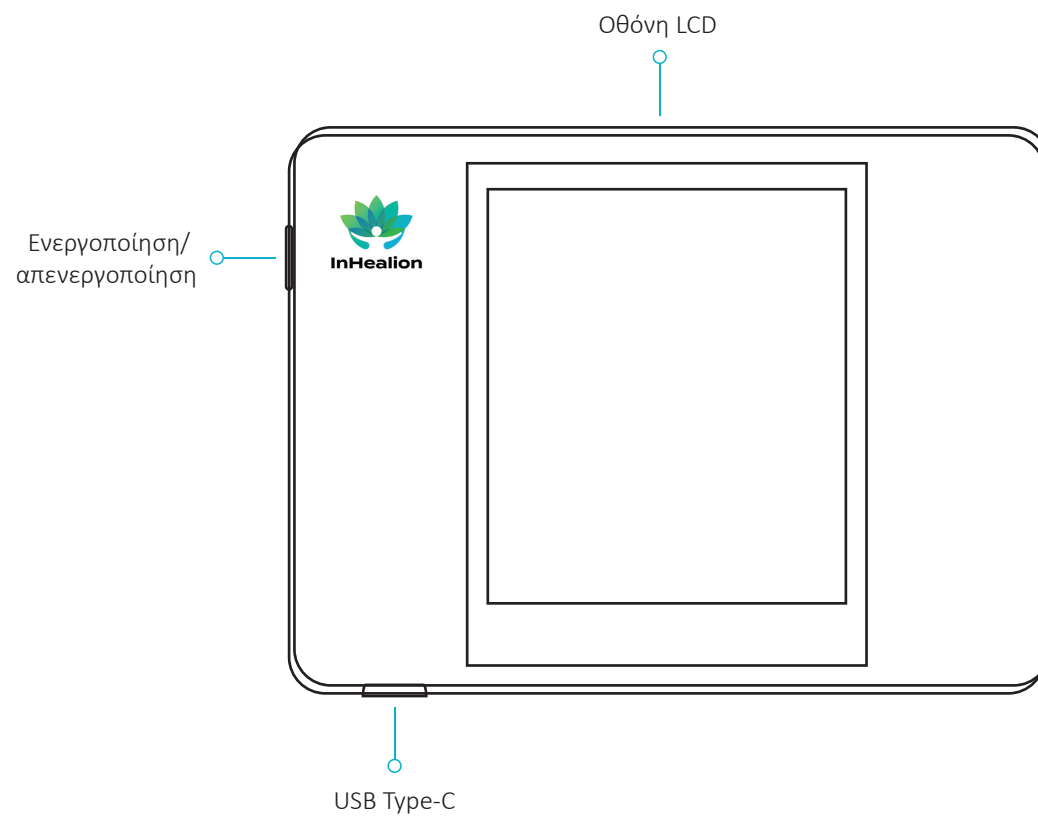


Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση Συσκευής

Κρατήστε πατημένο το κουμπί “Power” της συσκευής και αφήστε το όταν ανάψει η οθόνη. Για να σβήσει η οθόνη κρατήστε πατημένο το κουμπί “Power” της συσκευής.

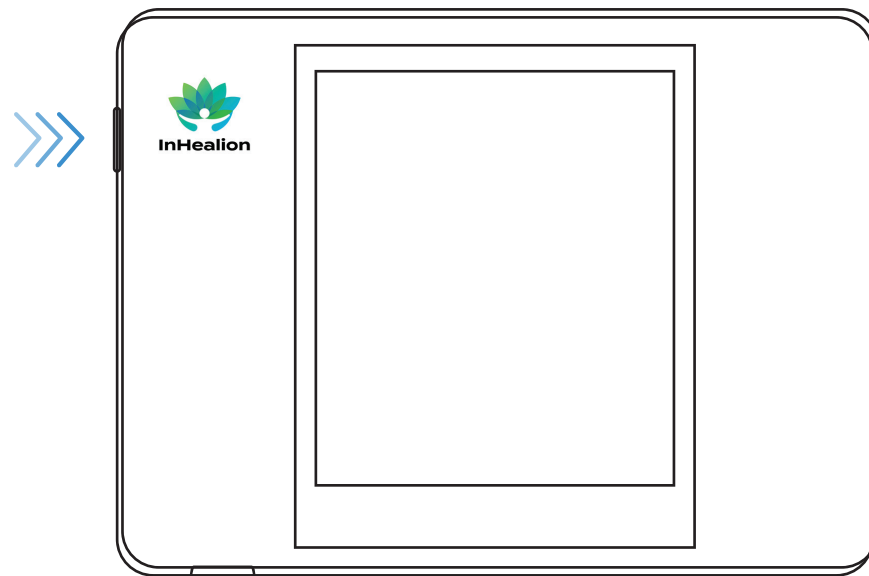

Επιλογή και εκτέλεση προγραμμάτων

Πατήστε το κουμπί “Stop” στην οθόνη της συσκευής, διαλέξτε από την λίστα προγραμμάτων της οθόνης σας το πρόγραμμα που επιθυμείτε να τρέξετε και πατήστε “Start”, ώστε να δείτε στην οθόνη την αντίστροφη μέτρηση του προγράμματος που επιλέξατε.

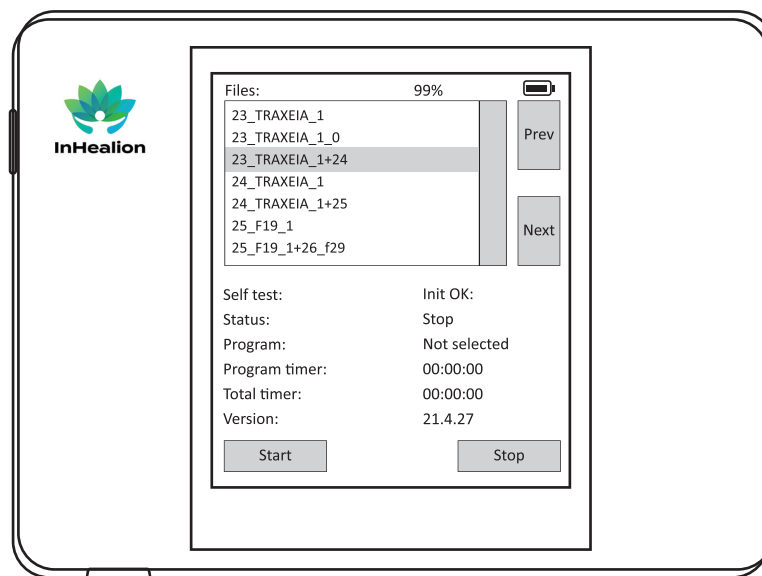

Απενεργοποίηση/Ενεργοποίηση Συσκευής

Ανοίχτε τον browser που χρησιμοποιείτε, επισκεφτείτε την σελίδα www.inhealion.gr και στη συνέχεια βάλτε ως username και password, το όνομα χρήστη και το συνθηματικό κωδικό που έχετε λάβει με την αγορά της συσκευής.



Log in to InHealion

Email

username



Password

password




LOGIN


[Forget your password?](#)

Κατέβασμα εφαρμογής στον υπολογιστή/Laptop


- Κατεβάστε την εφαρμογή του υπολογιστή στο account σας, στο μενού software--> Inhealion-setup.
- Εγκαταστήστε την εφαρμογή πατώντας διπλό κλικ στο inhealion-setup.
- Αν τα windows εμφανίσουν μήνυμα κινδύνου, πατάτε “More-Info” και επιλέγετε το Run anyway.

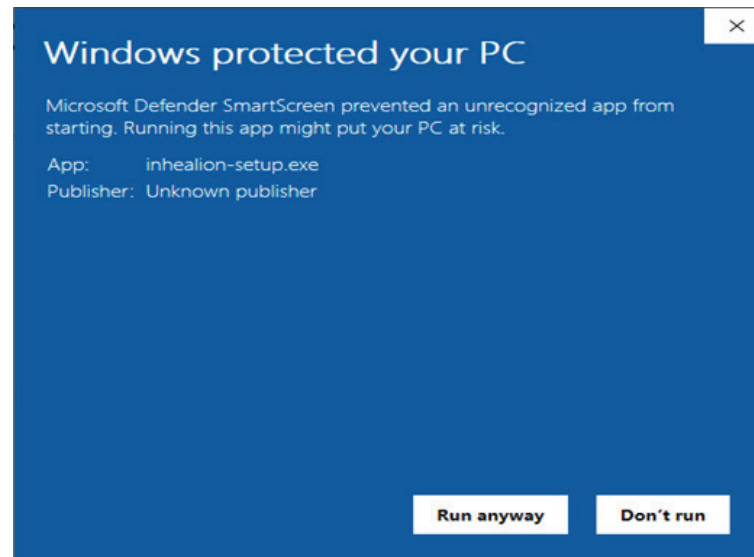


- Έπειτα επιλέγετε “install”

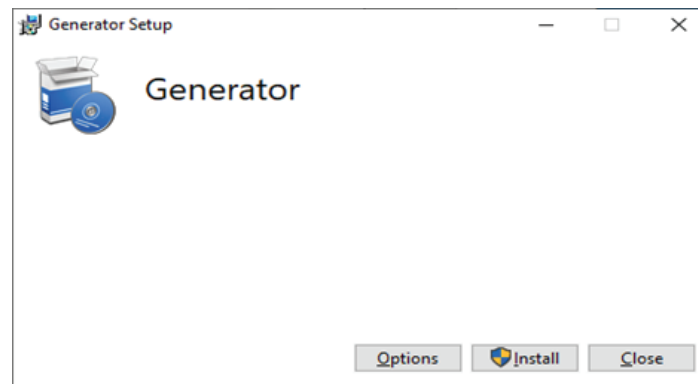


- Στο νέο παράθυρο που εμφανίστηκε πατήστε το κουμπί «αποσυμπίεση» ή «Extract»

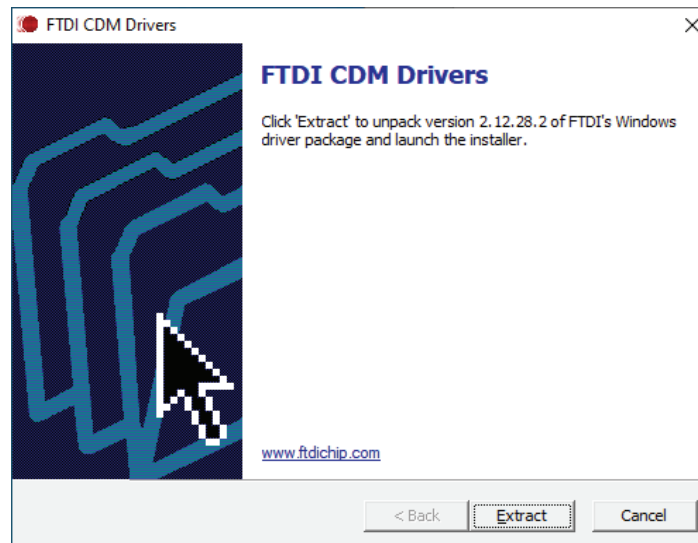


- Στη συνέχεια το κουμπί «επόμενο» ή «Next»

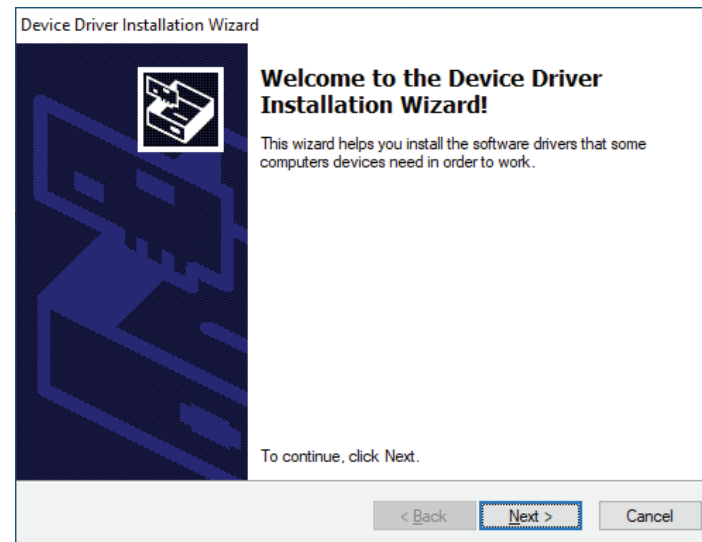

- Στη συνέχεια διαλέξτε το «συμφωνώ με τους όρους» και πατήστε το κουμπί «επόμενο» και στη συνέχεια το κουμπί τέλος.

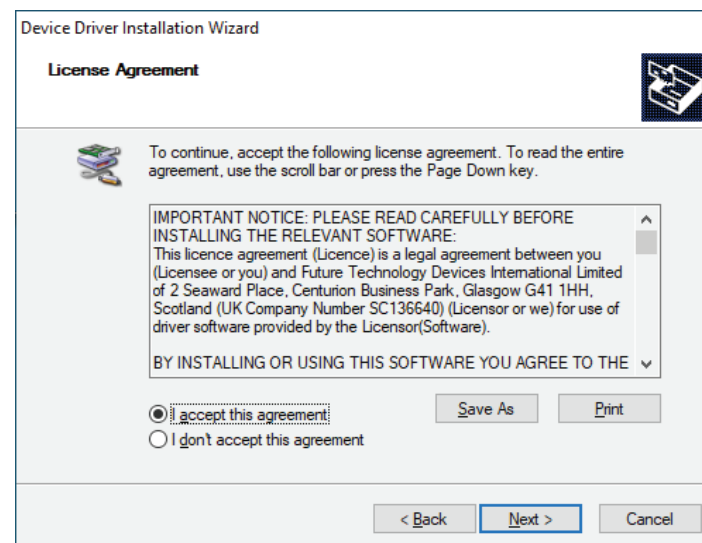


- Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε επιτυχώς, πατήστε το κουμπί «κλείσιμο».

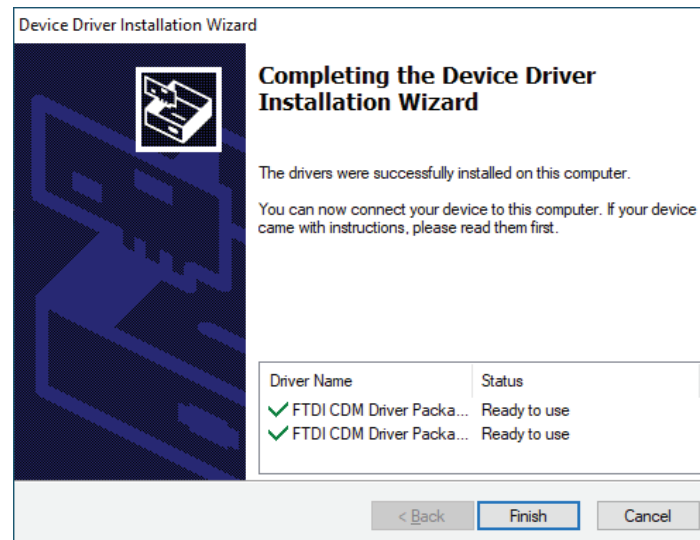

Σύνδεση συσκευής με υπολογιστή/Laptop μέσω USB

Συνδέετε τη συσκευή με τον υπολογιστή με τα καλώδια USB που βρίσκεται στη συσκευασία

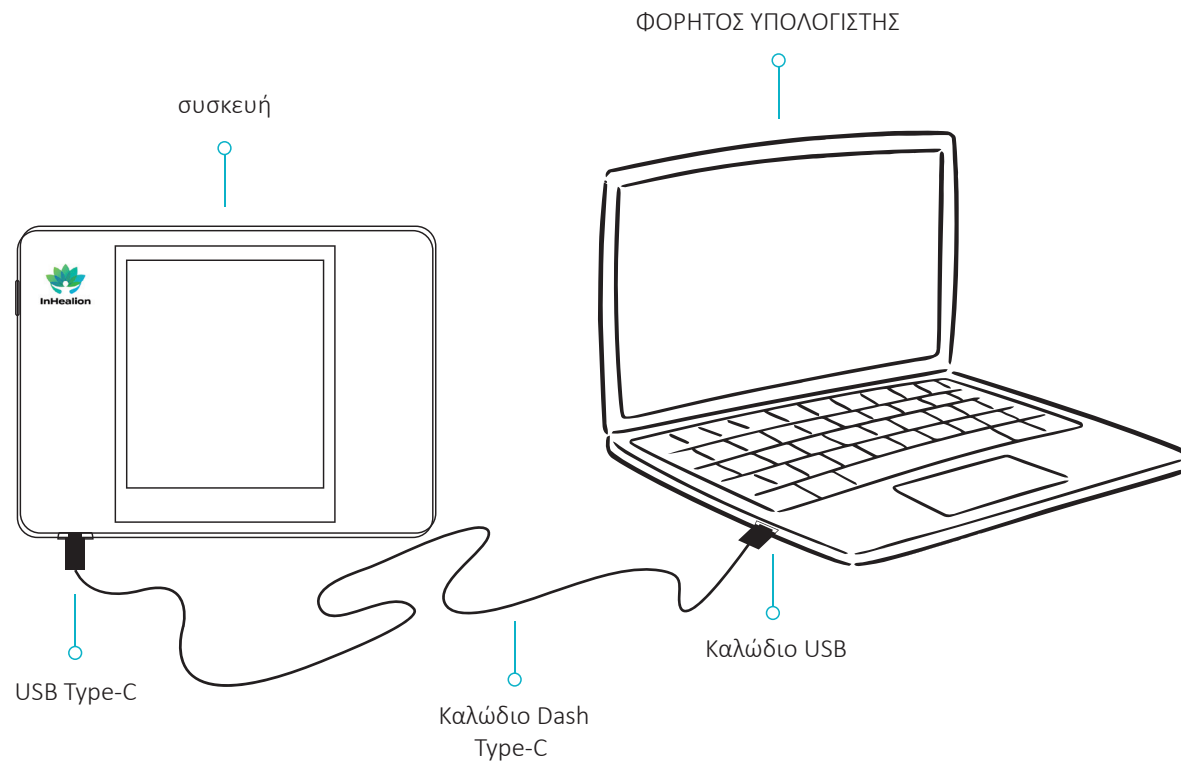

Εισαγωγή προγραμμάτων/συχνοτήτων στην συσκευή μέσω υπολογιστή

Εφόσον έχετε συνδεδεμένη τη συσκευή με τον υπολογιστή και έχετε ανοίξει και την εφαρμογή «Inhealion» που εγκαταστήσατε, συνδεθείτε με το λογαριασμό σας στην ιστοσελίδα www.inhealion.gr και αφού διαλέξετε το φάκελο με τα προγράμματα που θέλετε να φορτώσετε στη συσκευή πατήστε το κουμπί “Import to device”.

Programs

 10-03-22 expires in 5 months	10-03-22 IMPORT TO DEVICE 
 01-04-22 expires in 6 months	
 30-07-22 expires in 10 months	


Total programs: 8

Asbestosis.txt

Atrophic_Gastritis.txt


Εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό Android

Η εγκατάσταση της εφαρμογής στο κινητό Android γίνεται από την εταιρεία μας, κατά την παραλαβή της συσκευής. Επιπλέον μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή απο το “Playstore” γράφοντας στην αναζήτηση “Inhealion”

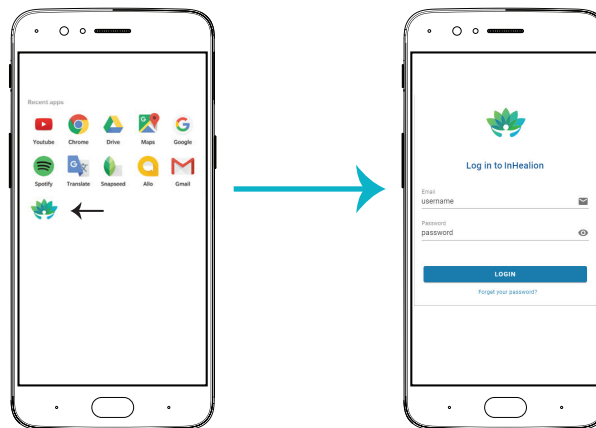

Σύζευξη συσκευής και smartphone μέσω Bluetooth

Τοποθετήστε την συσκευή Elite 200 δίπλα ακριβώς στο κινητό τηλέφωνο σας. Αφού έχετε ανοίξει την εφαρμογή Inhealion και έχετε συνδεθεί με τους κωδικούς σας, σας εμφανίζεται ένα παράθυρο με τις διαθέσιμες συσκευές Bluetooth προς σύζευξη. Από την λίστα συσκευών, διαλέγετε την «Inhealion» και περιμένετε να γίνει η σύζευξη.

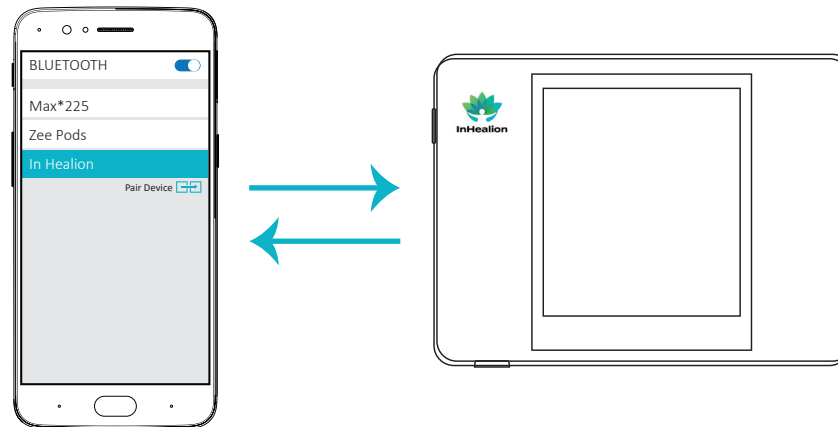

Εισαγωγή προγραμμάτων/συχνοτήτων στην συσκευή μέσω κινητού

Εφόσον έχετε ανοίξει την εφαρμογή Inhealion και έχει γίνει η σύζευξη επιτυχώς εμφανίζονται φάκελοι με ημερομηνίες στην οθόνη του κινητού σας. Διαλέγετε το φάκελο με την ημερομηνία προγραμμάτων που σας ενδιαφέρει να φορτώσετε στη συσκευή σας και πατάτε το κουμπί “Import”. Περιμένετε μέχρι να φορτωθούν τα προγράμματα στη συσκευή και είστε έτοιμοι.

